

เรื่อง	การติดตั้งโปรแกรม G-IDSS เวอร์ชัน 2.9.0.1	ระบบ
รุ่นรถ	MU-X และ All New D-MAX ตั้งแต่รุ่นปี 2012 เป็นต้นไป	วิเคราะห์และ วินิจฉัยปัญหา

โปรแกรม G-IDSS สำหรับเชื่อมต่อบระบบควบคุมเครื่องยนต์เพื่อตรวจสอบวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหา ปัจจุบันได้อัพเดทใหม่เป็น โปรแกรม G-IDSS เวอร์ชัน 2.9.0.1 ซึ่งได้เพิ่มข้อมูลในส่วนของกลุ่มการซ่อม (ESI) และเตรียมพร้อมสำหรับฟังก์ชันเพิ่มเติมในอนาคต

ตัวอย่าง แผ่นโปรแกรม G-IDSS เวอร์ชัน 2.9.0.1




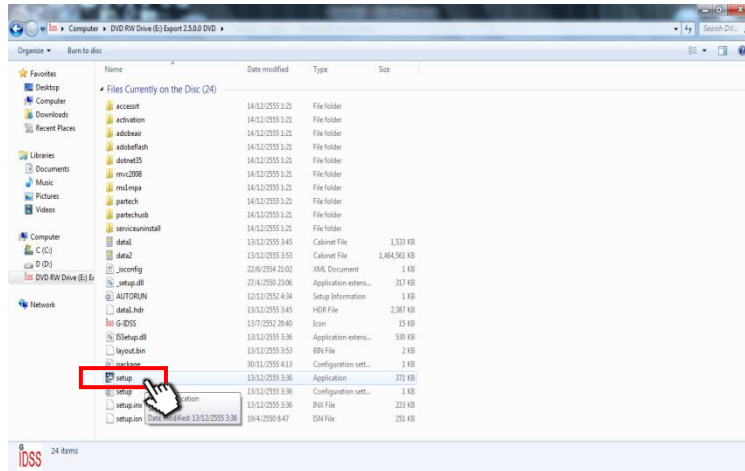
ข้อสำคัญ

- ห้ามลบ (Uninstall) โปรแกรม G-IDSS เวอร์ชันเดิมออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
- ต้องติดตั้งแผ่น DVD โปรแกรม G-IDSS เวอร์ชัน 2.9.0.1 ในเครื่องที่มีโปรแกรม G-IDSS ติดตั้งอยู่ก่อนแล้วเท่านั้น
- ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาขณะทำการติดตั้ง


หมายเหตุ : ระยะเวลาดำเนินการติดตั้งประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ใช้งาน

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม


1. ใส่แผ่น DVD โปรแกรม G-IDSS แล้วเปิดขึ้นมา ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน “setup” 




2. เลือกติดตั้งภาษาอังกฤษแล้วเลือก “ถัดไป”

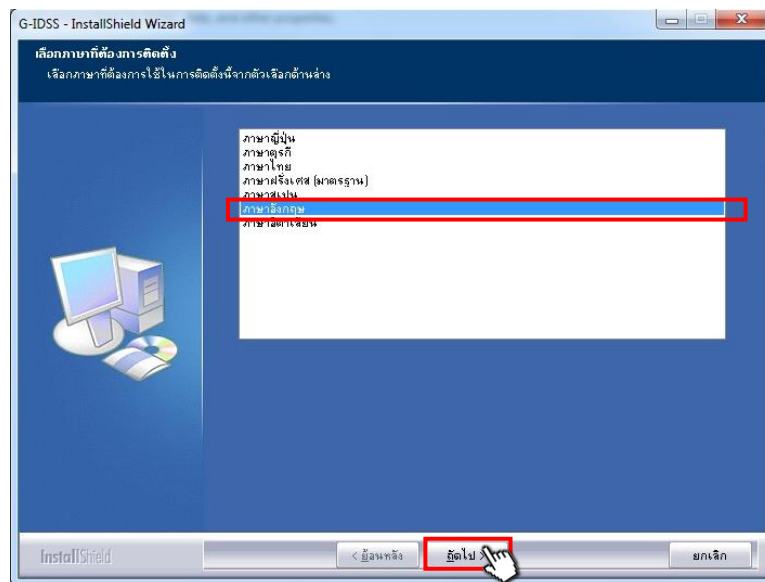


**** อาจพบว่าโปรแกรมให้ติดตั้ง Microsoft Visual C++ ให้ทำการติดตั้ง และดำเนินการต่อ****

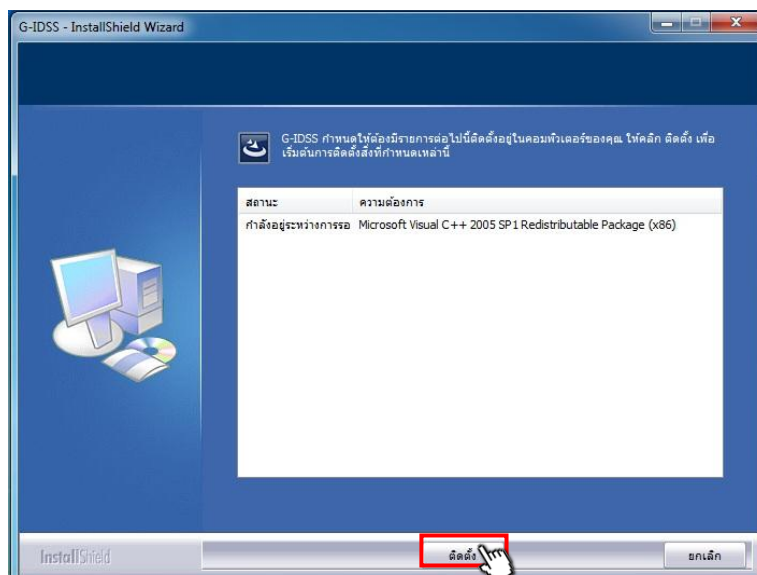


3. เลือก **“I am connected to the internet (A)”** แล้วคลิก **“Next”**

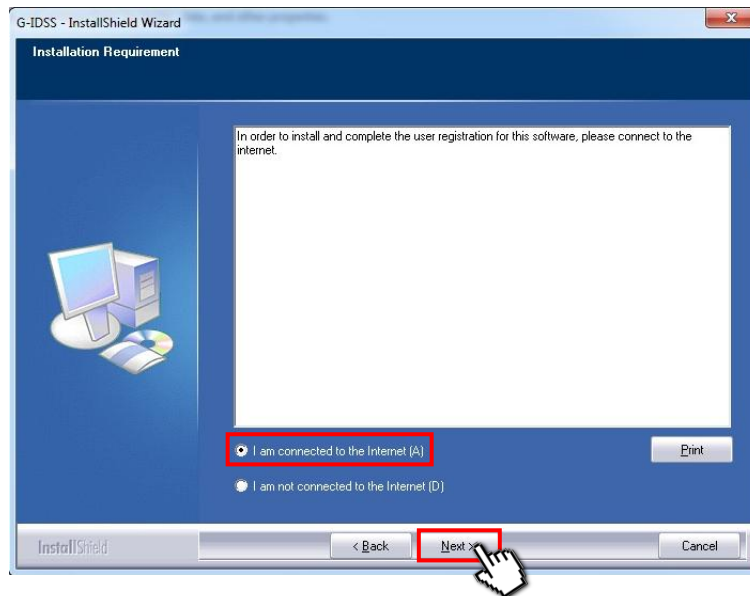


4. คลิก **“Next”**

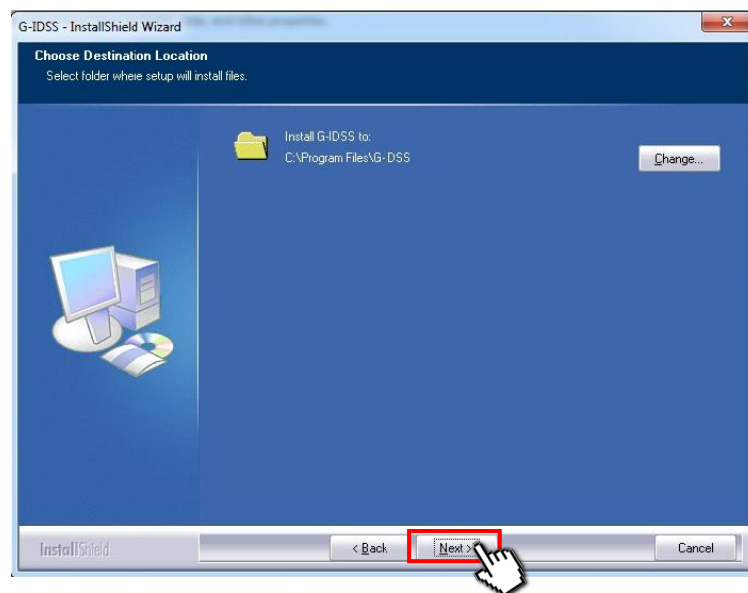


5. คลิก **“Install”** เพื่อทำการติดตั้ง โปรแกรมจะทำการติดตั้งโดยใช้เวลาประมาณ 1 นาที (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์)

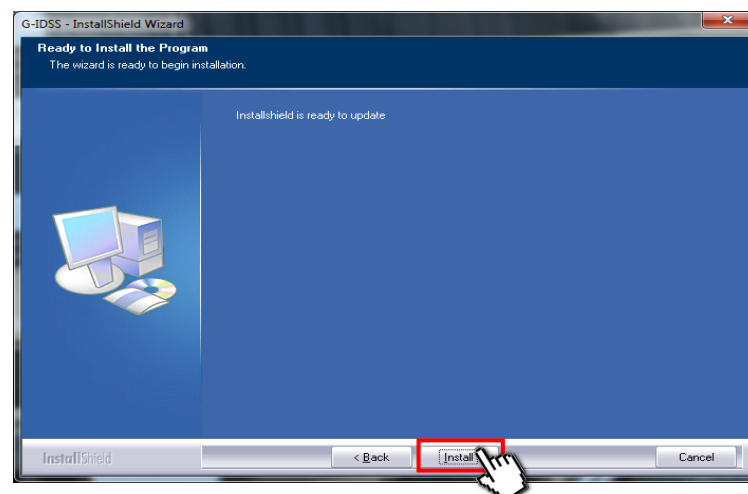


หน้าจอแสดงสถานะการติดตั้งโปรแกรม

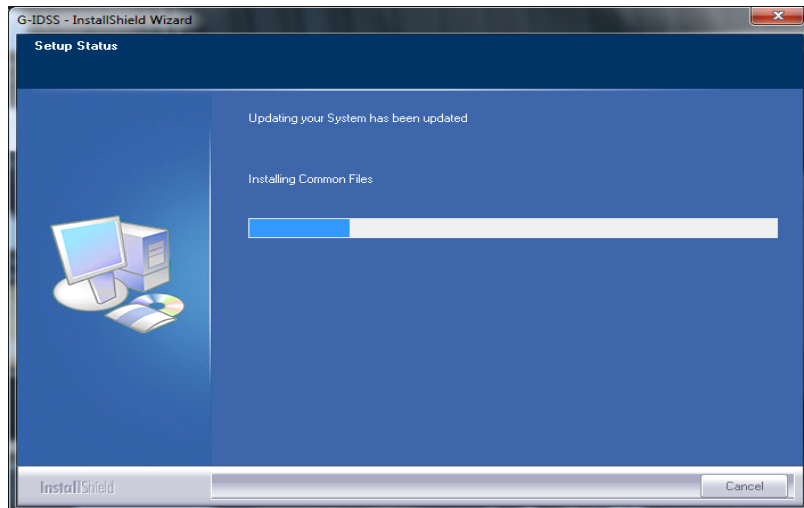


6. คลิก “Finish” เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น

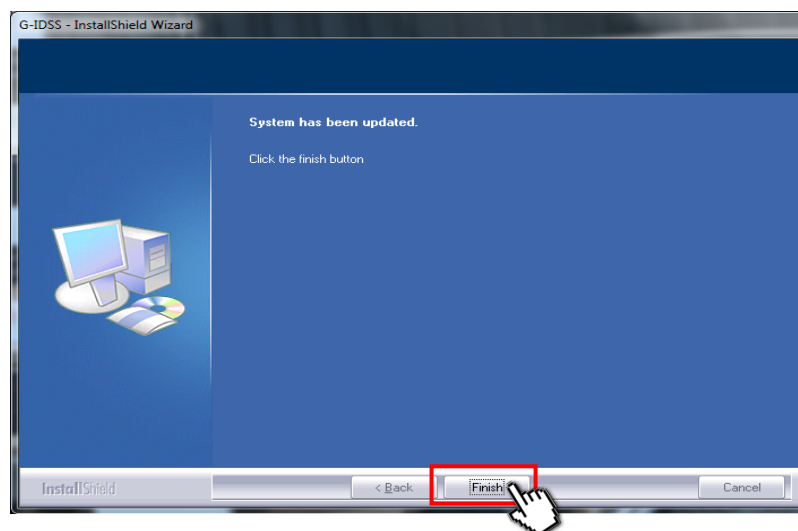


7. โปรแกรมจะแสดงกรอบข้อความเตือนขึ้นมา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการต่ออุปกรณ์ G-IDSS ไว้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วคลิกปุ่ม “OK”

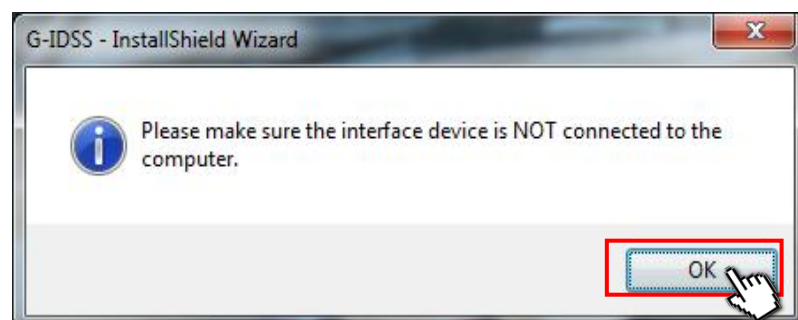


8. คลิกที่ปุ่ม “Next” เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ของโปรแกรม

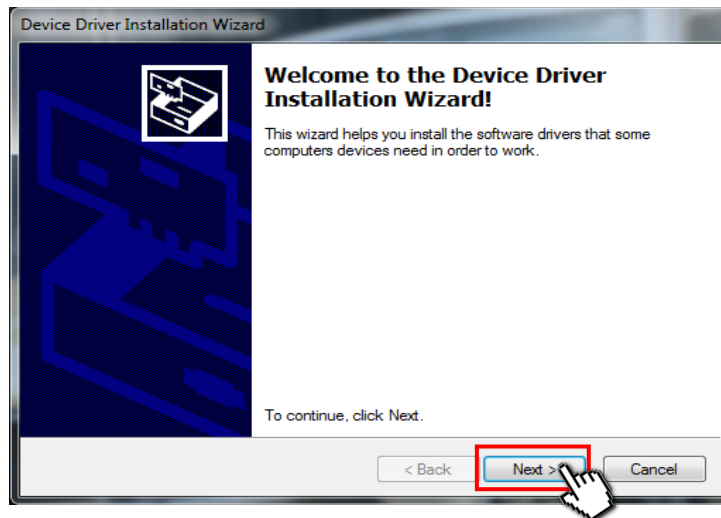


9. ถ้ามีกรอบข้อความปรากฏขึ้น ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ ให้คลิกปุ่ม “Install”

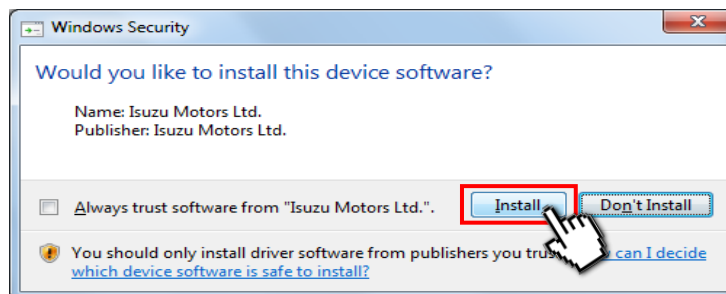


10. คลิกปุ่ม “Finish” เมื่อติดตั้งไดรเวอร์เรียบร้อยแล้ว

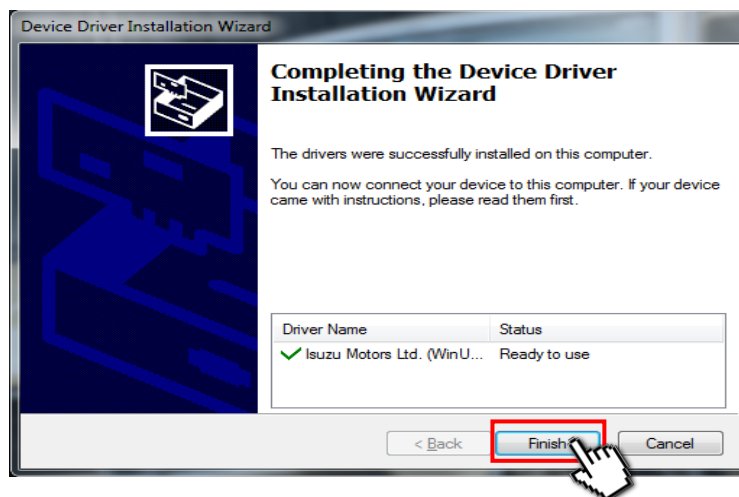


11. โปรแกรมจะแสดงกรอบข้อความสอบถามการเข้าดูข้อแนะนำต่างๆ ให้คลิก “No” เพื่อข้ามไปขั้นตอนต่อไป

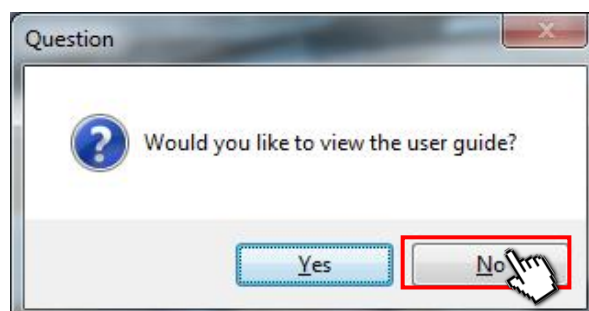

12. โปรแกรมจะร้องขอให้ทำการอัปเดต ให้คลิกปุ่ม “Yes”

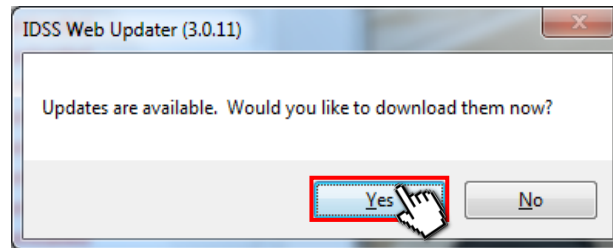

13. โปรแกรมจะแสดงความคืบหน้าของการดาวน์โหลด ให้รอจนกระทั่งการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น

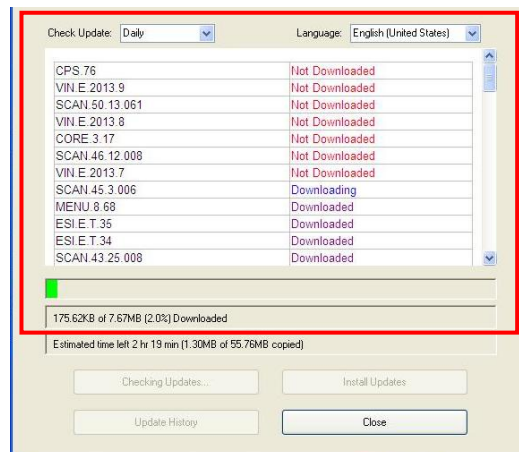

14. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น โปรแกรมจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้

14.1 สถานะเวอร์ชันอัปเดต (เวอร์ชันล่าสุด): โปรแกรมจะแสดงสถานะการดาวน์โหลด

14.2 จะปรากฏข้อความ “Please Close GIDSS and any related programs” → กรุณาปิดโปรแกรม GIDSS และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

14.3 ให้คลิกที่ปุ่ม “OK”




15. โปรแกรมจะแสดงความคืบหน้าของการติดตั้งเวอร์ชันอัปเดต ให้รอจนกระทั่งการติดตั้งเสร็จสิ้น

16. เมื่อติดตั้งเวอร์ชันอัปเดตเสร็จสิ้น โปรแกรมจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้

16.1 สถานะเวอร์ชันอัปเดต (เวอร์ชันล่าสุด): โปรแกรมจะแสดงสถานะการอัปเดต

16.2 จะปรากฏข้อความ “Your system is now updated” → ขณะนี้ระบบของคุณได้อัปเดตแล้ว

16.3 ให้คลิกที่ปุ่ม “OK”

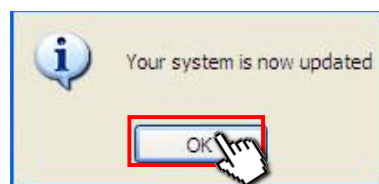

17. ทำการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ครั้งหลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว